




VILLA
SISTEMI
MEDICALI

SISTEMI
RADIOLOGICI

LEM Plus

Stativo Pensile a soffitto

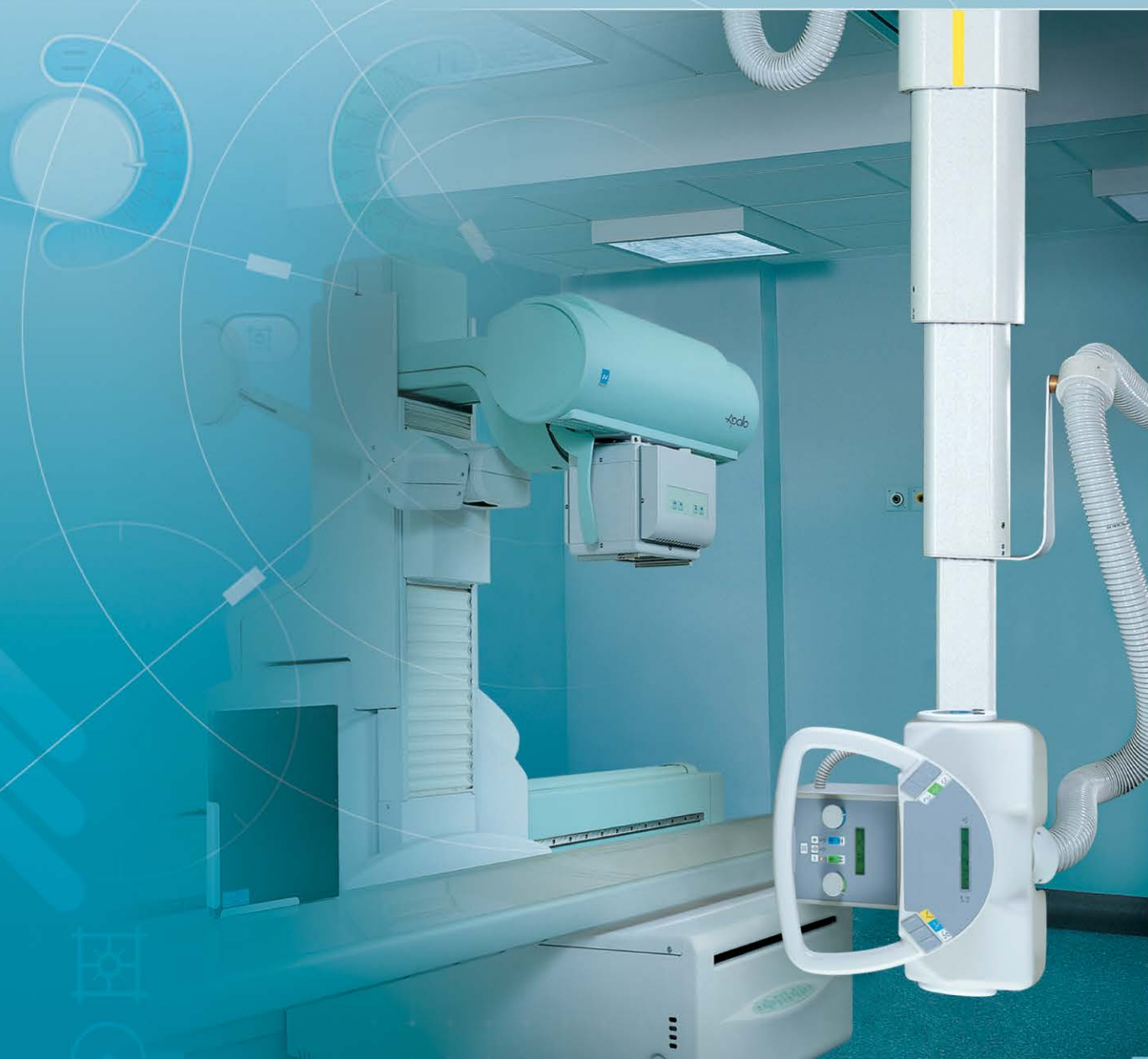


LEM Plus

Grazie alla sua versatilità e all'ampia gamma di configurazioni, LEM Plus è lo stativo pensile a soffitto ideale per qualsiasi dipartimento radiologico. Il design avanzato garantisce un alto livello di resistenza e solidità strutturale e possiede dimensioni ridotte. L'ampia corsa verticale e laterale permette un utilizzo altamente efficiente di tutto lo spazio della sala d'esame. Se accoppiato a un tavolo bucky, chest stand o una semplice barrella, è possibile ottenere un risultato radiografico immediato ed eccellente, grazie anche alla facilità e alla precisione di posizionamento. Progettato per performance elevate, LEM Plus può raggiungere ogni angolo della sala d'esame. Grazie alla colonna telescopica molto resistente e al movimento verticale della molla controbilanciata, il LEM Plus è in grado di garantire un posizionamento della testa del tubo rapido, agevole e preciso, ancora più facile grazie a un sistema intuitivo di codici a colori per ogni movimento. A richiesta, i movimenti possono essere equipaggiati con un meccanismo motorizzato.

Tutti i movimenti si possono bloccare in qualsiasi posizione fissa grazie a freni elettromagnetici. Indicatori di posizione ogni 90° aiutano l'allineamento del tubo con gli accessori più frequentemente utilizzati.

Rispetto alla versione precedente, la nuova generazione di LEM Plus offre:

- Nuovi binari a soffitto, maggior resistenza con minor peso.
- Freni permanenti per tutti i movimenti.
- Nuova tastiera con maniglie più grandi che integrano il comando di sblocco dei movimenti. Fornisce eccellente manovrabilità e accesso immediato a tutti i comandi.

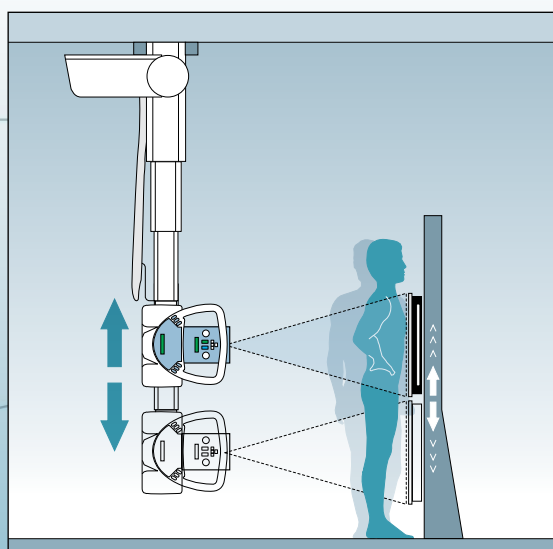

L'opzione di Autotracking

può assicurare l'allineamento verticale automatico tra il tubo e il detettore. Quando viene equipaggiato con questa funzione, il LEM Plus aumenta ulteriormente la facilità e la precisione del posizionamento, velocizzando il flusso di lavoro.



LEM Plus può essere tipicamente associato a un tavolo bucky.



Accoppiato a tavoli con comando remoto, LEM Plus può eseguire proiezioni laterali.



Un'altra configurazione tipica del LEM Plus è quella associata a un Chest Stand.

Villa Sistemi Medicali: una grande esperienza al servizio del Cliente



Villa Sistemi Medicali Spa
20090 Buccinasco (Mi) Italy
Via delle Azalee, 3
Tel. +39 02 48859.1
Fax +39 02 4881.844
www.villasm.com
vsminfo@villasm.com

Villa Radiology Systems
91 Willenbrock Rd. B-1
Oxford, CT 06478 - USA
Tel. +1 203 262 8836
www.villaus.com



ISO 9001:2008



ISO 13485:2003

