

moviplan 800

Sistema per Radiologia Generale



radiology ahead

semplicità d'uso ed efficienza

Moviplan 800 è un sistema radiografico *modulare* caratterizzato da un eccellente rapporto prezzo-prestazioni, ideale per un centro diagnostico o un pronto soccorso che ricerca un'efficiente connubio fra *qualità dell'immagine, semplicità d'uso e rapidità d'esecuzione* dell'esame.

L'*ampia gamma di configurazioni* del sistema, con stativi portatubo a pavimento o a soffitto, generatori ad alta frequenza, tubi radiogeni e

teleradiografi, permette di soddisfare le primarie esigenze di prestazioni ed applicazioni, dal piccolo studio privato fino alla struttura pubblica di medie dimensioni, senza richiedere mai un budget rilevante.

Lo sblocco del piano flottante porta-paziente viene eseguito rapidamente attraverso il distintivo *sistema di fotocellule* poste alla base del tavolo.



modularità & facilità d'uso

I movimenti risultano sempre fluidi e leggeri, mentre l'*ampiezza* e la *robustezza* del tavolo consentono il posizionamento anche di persone voluminose.

Per combinare la *massima accessibilità* per il paziente con la necessaria *ergonomia* di utilizzo, Moviplan 800 è anche disponibile con movimento verticale motorizzato, che permette di posizionare rapidamente il tavolo all'altezza da terra più conveniente per *agevolare l'accesso* ai pazienti barellati, non collaboranti, anziani e bambini.



versione con colonna a pavimento

Nella sua configurazione di base, Moviplan 800 è provvisto di colonna con movimento su rotaia a pavimento. Il *profilo estremamente contenuto* della rotaia di scorrimento della colonna minimizza l'interferenza con il personale di sala o con le barelle. L'intero sistema *non necessita* inoltre *di fissaggio a muro o a soffitto*, rendendo agevole l'installazione in qualsiasi locale.


I movimenti perfettamente controbilanciati dello stativo porta-tubo vengono eseguiti rapidamente e senza sforzo, pur garantendo un'estrema *accuratezza di posizionamento* grazie a robusti freni elettromagnetici. I comandi dei movimenti sono raggruppati su una *tastiera integrata* sul tubo radiogeno, ideata per semplificare l'utilizzo.



movimenti rapidi & precisi

La colonna radiografica di Moviplan 800 è inoltre disponibile nella *versione tomografica*, che permette di espandere ulteriormente i campi di applicazione con la tecnica della *stratigrafia lineare*. L'ampia scelta di programmi tomografici (con quattro angoli e tre velocità)

permette di ottenere *proiezioni di qualità eccellente* in ogni distretto anatomico. Ulteriore vantaggio di questa configurazione è il *movimento motorizzato* di traslazione della colonna, che non richiede all'operatore alcuno sforzo.

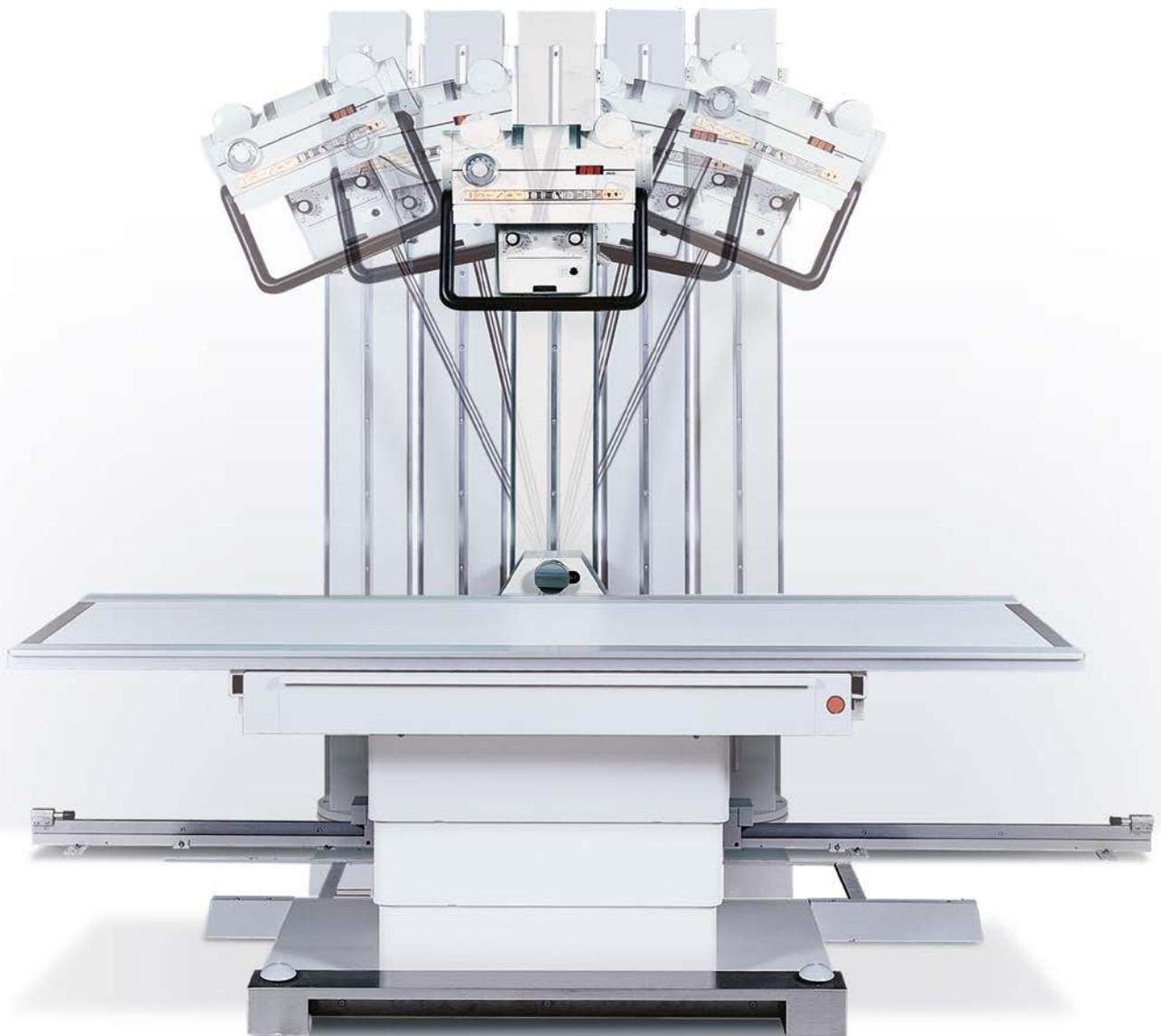

versione con pensile a soffitto

Moviplan 800 con lo *stativo pensile a soffitto Lem Plus* consente l'*accessibilità totale* al tavolo d'esame ed uno *sfruttamento ineguagliabile dello spazio* nella sala diagnostica.

L'ampia corsa verticale e laterale con i movimenti controbilanciati permette di raggiungere efficientemente ogni angolo della sala d'esame, mentre l'*impugnatura ergonomica* e la codifica

dei movimenti e dei comandi mediante differenti colori rendono rapido ed agevole il posizionamento dell'intero sistema.

Tutti i movimenti si possono bloccare in qualsiasi posizione grazie a freni elettromagnetici. Indicatori di posizione ogni 90° aiutano l'*allineamento del tubo* con gli accessori più frequentemente utilizzati.



L'abbinamento con un teleradiografo consente l'esecuzione degli esami con paziente in posizione eretta, quali gli esami al torace o agli arti inferiori.

La *gamma di teleradiografi* comprende, oltre al modello base con solo movimento verticale, anche una versione con *potter orientabile* per l'esecuzione di particolari proiezioni del cranio e degli arti superiori ed una versione con *potter 40x90 cm* per esami alla colonna vertebrale completa.



ergonomia & versatilità





radiology ahead

Competenza negli impianti radiologici

Villa Sistemi Medicali è tra i maggiori produttori di sistemi radiologici al mondo. Beneficiando di più di 50 anni di esperienza nel settore radiologico, le competenze dell'azienda comprendono tutte le tecnologie che permettono di soddisfare qualsiasi esigenza in ambito radiologico.

Una vasta gamma di apparecchiature

La nostra gamma include:

- Sistemi di radiologia digitale
- Tavoli telecomandati
- Tavoli ribaltabili convenzionali
- Tavoli per radiografia generale
- Apparecchi portatili da corsia
- Archi a C per sala operatoria
- Sistemi per mammografia

Il Servizio Assistenza: una priorità

Una rete di tecnici altamente qualificati e specializzati garantisce interventi efficienti ed affidabili alle apparecchiature per la radiologia medica di Villa installate ovunque nel mondo. Programmi di consulenza specialistica e contratti di assistenza tecnica vengono studiati su misura per rispondere ad ogni esigenza della clientela.

Il Servizio logistico: una presenza capillare

Sistemi completi, così come ricambi, accessori e materiali di consumo sono inviati giornalmente da Villa Sistemi Medicali ai propri clienti ovunque nel mondo. Le spedizioni si effettuano via mare, via terra e via aria, oppure, se necessario, viene organizzato anche trasporto intermodale.

Villa Sistemi Medicali Spa

Via delle Azalee, 3
20090 Buccinasco - Italy
Tel. +39 02 48859.1
Fax +39 02 4881.844
vsminfo@villasm.com
www.villasm.com

