



---

# Cyberbloc FP

# Cyberbloc FP

primax  
INTERNATIONAL

## Arco a C chirurgico

### Operatività Totale

Da ogni lato, con console multi-touch e immagine live. Operatore sempre in presa diretta con l'esame in corso.

### Flat Panel

Da 21x21cm con 1,8 Milioni di pixel o 30x30cm con 3,8 Milioni di pixel per immagini ad alta risoluzione e bassa dose. Griglia rimovibile per applicazioni a bassa dose.

### Potenza Modulata

Emissione Rx in modalità pulsata con potenza modulata per ogni tipo di procedura. Immagini con elevato rapporto qualità/dose.

### Stazione di Visualizzazione

Dettagli ben definiti con zoom fino a 1920x1920 pixel. Doppio monitor in modalità portrait con ridotto ingombro. Gestioni immagini con il solo "tocco" per revisione e documentazione esame. Monitor da 21,5" touch screen ad altezza variabili e orientabili. Porte I/O per una facile integrazione con la rete IT.

### Design Compatto

Arco a C di diametro elevato, leggero e manovrabile per facilitare l'accesso al campo operatorio. Posizionamenti rapidi e precisi senza sforzi per l'operatore. Facilità di spostamento tra sale operatorie.



# Cyberbloc FP

primax  
INTERNATIONAL

## Pronto in campo

Movimenti di angolazione e rotazione orbitale dell'arco perfettamente bilanciati. Posizionamenti rapidi e precisi che semplificano le attività dell'operatore.



### Rotazione Orbitale

L'ampia rotazione orbitale di  $+65^\circ$  e  $-95^\circ$  facilita le proiezioni trasversali senza ricorrere allo spostamento dello stativo attorno al tavolo operatorio.



### Rotazione Angolare

Ampi e precisi movimenti angolari maggiori di  $\pm 210^\circ$ .



### Elevazione

Ampia escursione verticale dell'arco fino a 450mm.

# Cyberbloc FP

**prima8**  
INTERNATIONAL


## Console

Orientabile e sempre visibile dall'operatore, in presa diretta con l'intervento chirurgico. Immagini "live" o memorizzate facilmente accessibili per scegliere, modificare, muovere, inviare, trascinare, comprimere, ridurre, espandere... basta toccare.

## Stazione di Visualizzazione

Accesso immediato dell'operatore con dispositivo NFC. Stazione di visualizzazione con monitor in "Portrait" regolabili in altezza e angolazione per garantire la miglior visibilità delle immagini e dei comandi in un solo colpo d'occhio.

Da vicino, la mano può "toccare" le icone e selezionare le anteprime senza disturbare la visione dell'immagine. Da lontano le immagini poste in alto garantiscono un campo visivo sgombro.

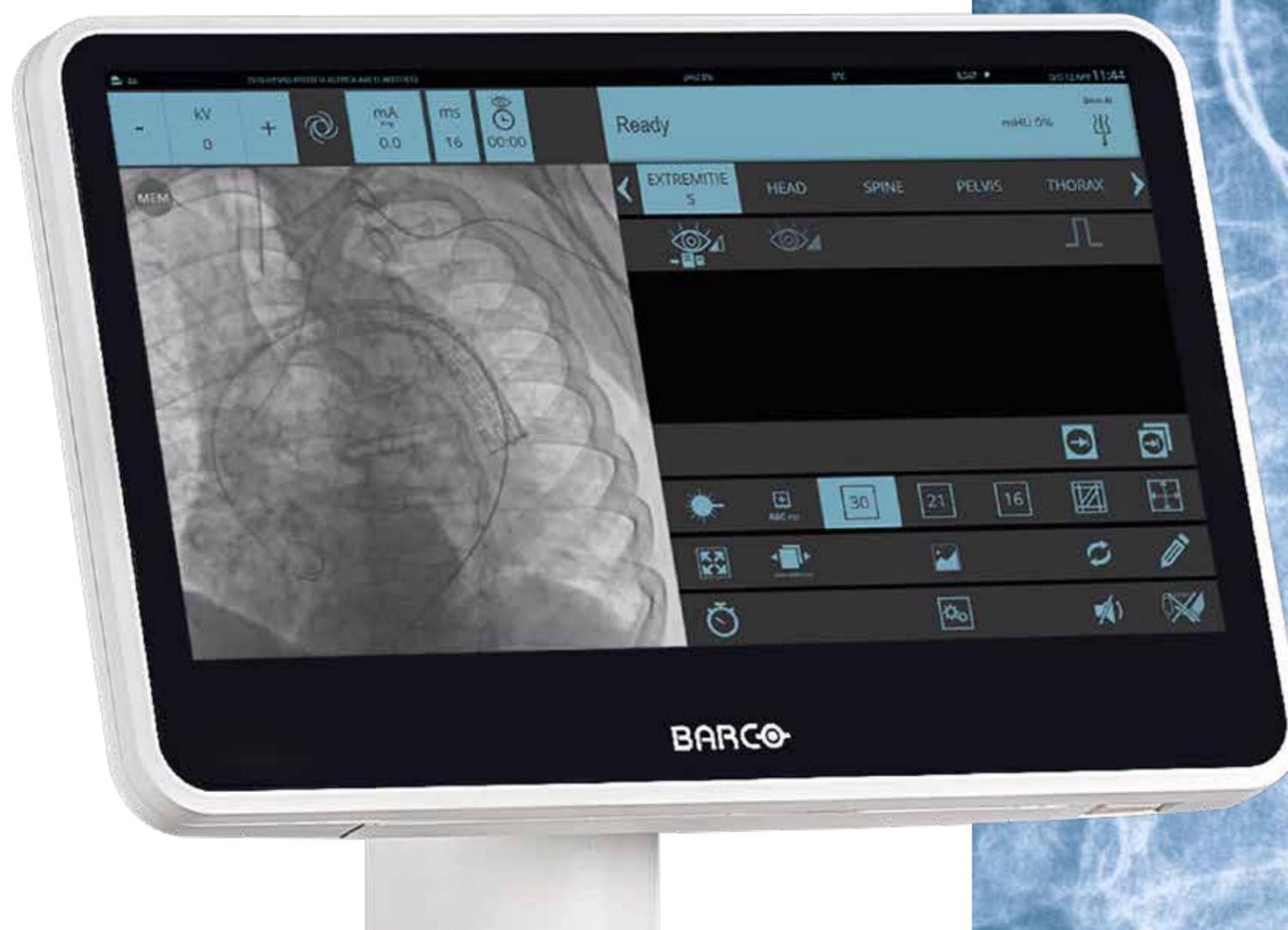

# Cyberbloc FP

## Dettagli di qualità

Leggerezza e robustezza sono garantite dall'uso di materiali selezionati quali leghe leggere, fibra di carbonio, poliuretano e polimeri speciali.

**primax**  
INTERNATIONAL



Pedaliera wireless multifunzione; meno cavi a pavimento.



Griglia removibile per procedure in chirurgia pediatrica a bassa dose.



Modalità di emissione Rx gestita sia da pedaliera che da pulsante multifunzione.



Facile sollevamento delle ruote anteriori per superare piccoli ostacoli.



Centratura a zero dose con centratori laser lato tubo radiogeno e flat-panel.



Login sicuro e istantaneo con dispositivo NFC.



# Cyberbloc FP

**primax**  
INTERNATIONAL

## Sempre e Ovunque

### **Assistenza Globale**

Primax International segue e cura l'assistenza dei suoi prodotti ovunque, per tutta la durata della loro vita.

### **Assistenza Remota**

In Cyberbloc FP la connettività è nativa, facilitando quando richiesto il supporto da remoto, sia per la verifica dell'efficienza sia per l'aggiornamento e manutenzione del sistema.

### **Assistenza di Prossimità**

Corsi di formazione tecnica sono organizzati con regolarità. Ai tecnici, provenienti da tutto il mondo, viene insegnato ad installare e riparare la nostra gamma di apparecchiature.



# Cyberbloc FP



**primax**  
INTERNATIONAL

Via Alessandro Volta, 10  
24060 Torre de Roveri ITALY

+39 035 4500002  
sales@primaxint.com  
[primaxint.com](http://primaxint.com)